




Pachane[®]

CATÁLOGO DE PRODUTOS

WORKSTATION



A background image of a laboratory setting. In the foreground, a person wearing a white lab coat, a blue surgical mask, and blue gloves is using a pipette. In the background, another person wearing a white lab coat, a blue surgical mask, and blue gloves is holding a test tube. A microscope is visible on the left side of the image. The text is overlaid in the center.

**LIMPEZA
E SEGURANÇA
É DISSO QUE
ESTAMOS FALANDO**

BANCADA PARA PCR WORKSTATION

PCR, DNA E RNA

A bancada workstation de PCR, é uma estação de trabalho especializada projetada para reduzir o risco de contaminação durante a preparação de reações de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). A PCR é uma técnica extremamente sensível, capaz de amplificar pequenas quantidades de DNA, o que torna a prevenção de contaminação crucial.

TODOS OS MODELOS APRESENTAM:

- Suporte interno para pipetadores
- Apoiaadores de alta aderência para nivelamento.
- 2 Lâmpadas UV de 15 Watts.
- 1 Lâmpada fluorescente de 20 Watts.
- 2 Tomadas internas (110 e 220 Volts).
- Dois interruptores individuais (lâmpada fluorescente e UV)
- Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado.




CONFORMIDADE



ABNT NBR- 15767 ISO 14.644-1

RECURSOS BANCADA PARA PCR ALUMÍNIO

- Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.
- Assoalho em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza.
- Lateral e frontal totalmente em vidro temperado, para facilitar o trabalho e proteger o operador no momento de esterilização.
- Leve e de fácil manuseio

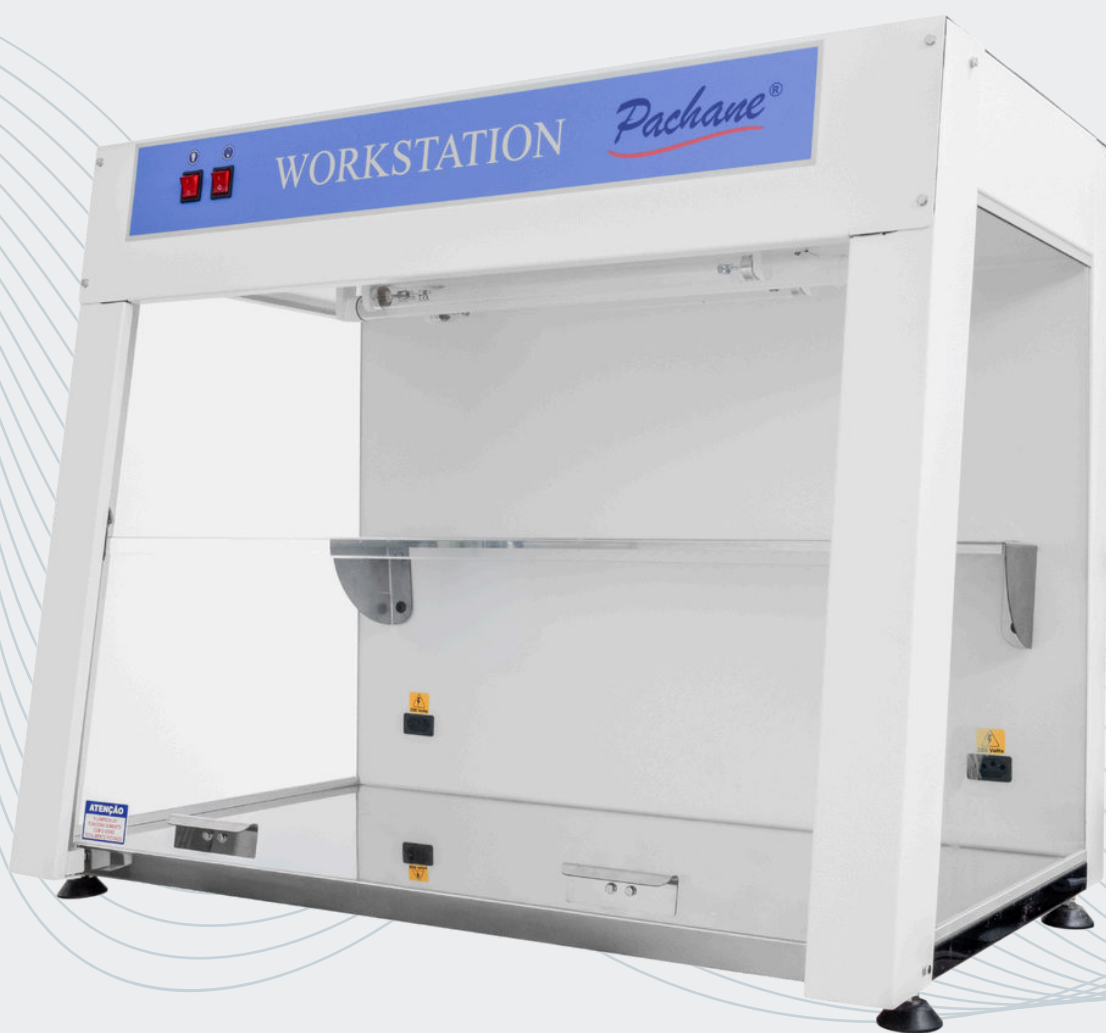


PROTEGE:

- ✓ AMOSTRA
- ✗ AMBIENTE
- ✗ USUÁRIO

RECURSOS BANCADA PARA PCR INOX



- Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.
- Assoalho em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza.
- Lateral e frontal totalmente em vidro temperado, para facilitar o trabalho e proteger o operador no momento de esterilização.
- Leve e de fácil manuseio

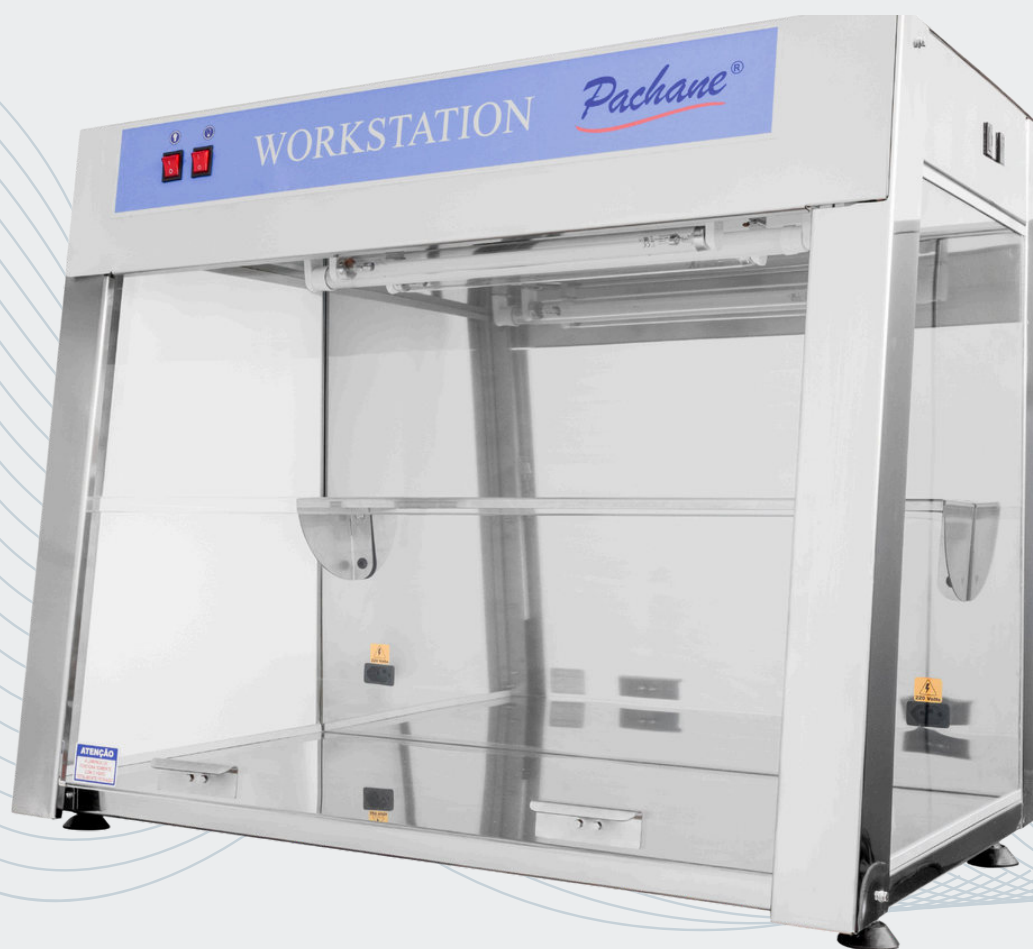

PROTEGE:

- ✓ AMOSTRA
- ✗ AMBIENTE
- ✗ USUÁRIO

DADOS DIMENSIONAIS

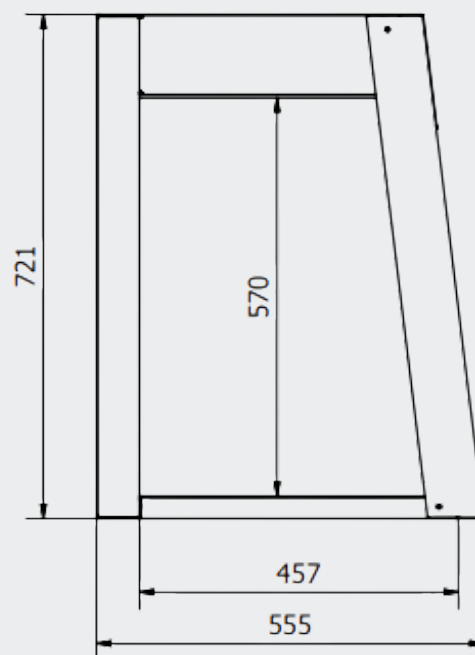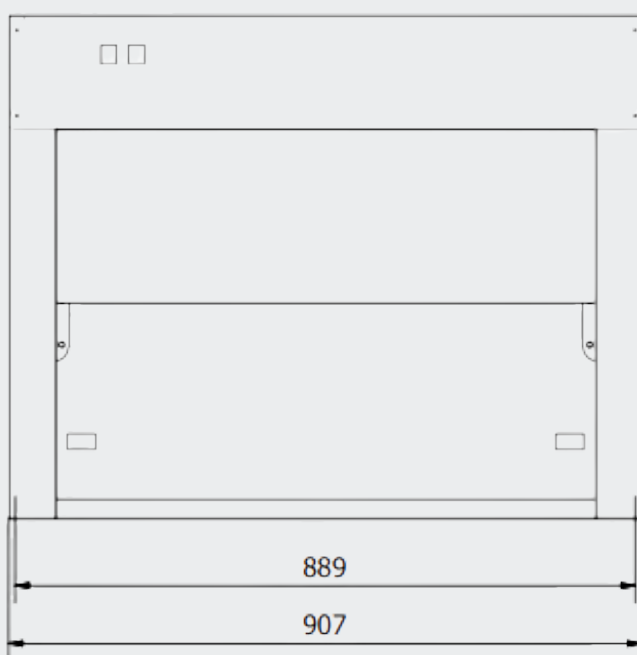

Dados dimensionais	Workstation
DIMENSÕES EXTERNAS	907 x 555x 721
DIMENSÕES DA ÀREA INTERNA	889 x 457 x 570

A PACHANE PODE FAZER ADAPTAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.



PARA UMA SÉRIE DE DESAFIOS,
UM MUNDO DE SOLUÇÕES.



EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

MD Serviços Ltda



Av. Professor Benedito de Andrade, 765
Unileste, Piracicaba SP, 13422-000



19 3429-0700



pachane@pachane.com.br



www.pachane.com.br

